

歩行補助つえの高さ調節のポイント

- 大腿骨 大転子の高さ ● 立位で腕を垂直におろしたときの手首の高さ ● (身長÷2) + 3cmの高さ
- つえ先を足先の15cm前外側についたときに肘を30度程曲げた高さ ※ 身体 の 状況、 つえ の 種類 により 専門 家 へ 相 談 可 能 。

楽スマ スリーベース

ケイ・ホスピア



一本杖と変わらない超軽量
安定感抜群の3面先ゴムを搭載
多点杖の新しいカタチです

型式	商品コード	TAISコード
R-102	754355	00875-000013
R-103	754360	

超軽量タイプ
適応身長 128~170cm

- 長さ: 約67~88cm ● 重量: 約0.32kg
- ベース: 最大幅11.5cm
- 材質: グリップ/カルブ PP・エラストマー
シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム

NEW



非課税



R-102 R-103


おすすめポイント 楽スマ スリーベース

新構造の3面先ゴム



新しく設計された低反発素材の先ゴムが着地時の衝撃を吸収し、スムーズな蹴り出しをサポートします。材質は滑りにくい合成ゴムを使用。さらに、磨耗しにくい新素材です。

2点で着地し、1点で蹴り出す

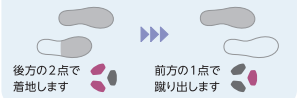

約320gの超軽量
重くなりがちな多点杖で一本杖と変わらない320gという超軽量を实现了ました。嬉しい軽さで使いやすいさも抜群です!



抗菌材入りグリップカバー付き
抗菌仕様のグリップカバー付き。こういう時代だからこそその安心をお届けします。滑り止めや傷防止効果もあります。

かる楽4点杖360(スマートガード付) シナノ



トール 適応身長 125~176cm

商品コード	TAISコード
754325	01436-000004

- 長さ: 65~90cm (11段階)
- 重量: 約0.53kg ● ベース: 9.6×9.6cm
- 材質: グリップ/カーボン+発泡ゴム
シャフト/カーボン、先ゴム/PP-10-16

スマートガード付で安定性をアップ

支柱が360度(前後左右)可動し、路面に設置しやすく、あらゆる傾斜に対応します。さらに傾斜する角度を12度に制限することで安定性が向上しました。



非課税

ダークブルー

かる楽4点杖360 シナノ



トール 適応身長 125~175cm

商品コード	TAISコード
754280	01436-000003

- 長さ: 65~90cm (11段階) ● 重量: 0.48kg
- ベース: 9.6×9.6cm
- 材質: グリップ/カーボン+発泡ゴム
シャフト/カーボン、先ゴム/PP-10-16

※グリップカバー付

首が回るので安定した接地面を確保。



非課税
在庫限定

ブラック

ソフトグリップカーボン4点杖+ シナノ



トール 適応身長 125~175cm

商品コード	TAISコード
754290	01436-000002

- 長さ: 65~90cm (11段階) ● 重量: 0.48kg
- ベース: 14.5×21cm
- 材質: グリップ/カーボン+発泡ゴム
シャフト/カーボン
先ゴム/PP-10-16

※グリップカバー付

基底面が広いので、安定します。



14.5cm

21cm

非課税

ブラック

おすすめポイント かる楽4点杖 360(スマートガード付) / かる楽4点杖 360 / ソフトグリップカーボン4点杖+

① 手のひらの痛みを和らげるソフトグリップ



柔らかい発泡ゴムにより、グリップ全体が被覆されています。手に掛かる圧力を吸収し、掌の痛みを軽減。

② 取り替え可能で清潔なシリコン製グリップカバー



シリコン製グリップカバー

単品でもお買い求めいただけます。

③ 超軽量、だけど強靱なオールカーボン製

杖の全体、つまりグリップの芯から4点の先端までカーボン素材を採用し、使い勝手のよい軽量感を実現しました。安全設計にも十分に考慮した強靱、かつ軽量のカーボンモデルです。



カーボン四点可動式スモールタイプ 島製作所



超軽量タイプ

型式	商品コード	TAISコード
74MC-3	754180	00576-000033

- 長さ: 62.5~88cm (11段階)
- 重量: 0.44kg
- ベース: 10×10cm



路面に着地しやすい支柱可動式。

非課税

在庫限定

クローズカフクラッチ伸縮 ソフトグリップカバー付き

フジホーム



トール 適応身長 132~192cm

型式	商品コード	TAISコード
WB5112	754305	00121-000022

- 長さ(グリップ~アームカフ): 約23~29cm (5段階)
- 長さ(グリップ~下部): 約69~99cm (16段階)
- 重量: 0.62kg
- 材質: グリップ/ポリプロピレン・エラストマー
シャフト/アルミニウム
アームカフ/ポリプロピレン
先ゴム/合成ゴム



手にやさしいソフトグリップカバー付!

非課税

おすすめポイント クローズカフクラッチ

ワールド・シリーズ(イタリア製)

ワールドシリーズは「自立歩行に不安でステッキにある程度の体重を預けながら歩行が必要な方」に適した商品です。(耐荷重100~150kg) クラッチ杖は「ひじと手のひらの2点で荷重を分散」するので、手のひらや手首への負担を軽減します。全てCEマーク対象品なので安全にご利用いただけます。



グリップからアームまでの長さ調整ができるので、最適な位置に調整が可能です。

EU(欧州連合)加盟国の基準を満たすものに付けられる基準適合マークです。

合わせてパッチンDX

日進医療器



トール

適応身長
L:163.5~183.5cm
M:149.5~169.5cm

※Lサイズのみ

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	TY156DX-L	754340	00175-000402
M	TY156DX-M	754345	00175-000403

- 長さ(全長): L/122.5~142.5cm、M/108.5~128.5cm
- 長さ(脇あて~握り): L/35.2~53.95cm、M/32.7~47.7cm
- 重量: L/約0.99kg、M/約0.91kg

<材質>
側弓・伸張棒/アルミニウム合金製
アルマイト仕上げ
脇あて・握り部/エストラマー
先ゴム/合成ゴム

1本

非課税

濡れた路面や床面での
危険を軽減!
「あっ、アプナイ!」を防ぎます

- 雨の日でもすべりにくい先ゴムで安心・安全です。
- 握りの高さ調整はワンタッチで可能。
- 1本からレンタルできます。
- サイズはLとMの2サイズからお選びいただけます。

おすすめポイント 合わせてパッチン DX

①Hyper V®
技術採用



濡れた路面・床面で水分をかき出してしっかりとグリップする。特滑性ゴムを使用した、独自のソールパターンを持つ先ゴムです。

②握り高さの調節方法



- ①左右のレバーを矢印の方向に外す。
- ②握り部を矢印の方向に押す。
- ③握りをセットする位置に移動させる。
- ④穴の位置を合わせ、矢印の方向に押す。
- ⑤左右のレバーを矢印の方向に回し固定する。

サービスコード(歩行器) 介護給付:171009 / 予防給付:671009

歩行器

歩行車や歩行器の高さ調節のポイント

- 身体の前方や側方で握りを持ったとき肘が軽く曲がり、身体が少し前傾した姿勢に調整する
- 前腕で支持する場合は、肘を90度に曲げたときの肘の高さ ※身体の状況、歩行器の種類により専門家へご相談ください。

アルコール10型シリーズ

星光医療器製作所

	商品名	商品コード	TAISコード	重量
固定	アルコール10型	742140	00125-000027	2.3kg
	アルコール10型M	742435	00125-000075	2.3kg
	アルコール10型L	742455	00125-000076	2.4kg
Aセット	アルコール10型-A	742420	00125-000077	2.6kg
	アルコール10型M-A	742440	00125-000079	2.6kg
	アルコール10型L-A	742460	00125-000082	2.7kg
Bセット	アルコール10型-B	742425	00125-000057	3.2kg
	アルコール10型M-B	742445	00125-000080	3.2kg
	アルコール10型L-B	742465	00125-000083	3.3kg
Cセット	アルコール10型-C	742430	00125-000078	3.8kg
	アルコール10型M-C	742450	00125-000081	3.8kg
	アルコール10型L-C	742470	00125-000084	3.9kg
NEW Dセット	アルコール10型-D	742690	00125-000095	3kg
	アルコール10型M-D	742695	00125-000096	3.2kg
	アルコール10型L-D	742700	00125-000097	3.5kg


- サイズ: 固定 10型 全幅45.8~47.1×奥行38~40.8×高さ62.5~75cm(6段階)
10型M 全幅49.1~50.4×奥行42.9~45.7×高さ70.1~82.6cm(6段階)
10型L 全幅53~54.6×奥行46~49.1×高さ76~88.5cm(6段階)
Aセット 10型-A 全幅46~47.3×奥行43.5~46.3×高さ69.2~81.7cm(6段階)
10型M-A 全幅49.3~50.6×奥行48.4~51.2×高さ76.8~89.3cm(6段階)
10型L-A 全幅53.4~55×奥行51.5~54.6×高さ82.7~95.2cm(6段階)
Bセット 10型-B 全幅45.8~47.1×奥行50.4~53.2×高さ71~83.5cm(6段階)
10型M-B 全幅49.1~50.4×奥行55.3~58.1×高さ78.6~91.1cm(6段階)
10型L-B 全幅53.2~54.8×奥行58.3~61.4×高さ84.5~97cm(6段階)
Cセット 10型-C 全幅47.3~48.6×奥行51.6~54.4×高さ78~90.5cm(6段階)
10型M-C 全幅50.6~51.9×奥行56.5~59.3×高さ85.6~98.1cm(6段階)
10型L-C 全幅54.9~56.5×奥行59.7~62.8×高さ91.5~104cm(6段階)
Dセット 10型-D 全幅49.5~50.5×奥行46~50×高さ69~81.5cm(6段階)
10型M-D 全幅53~54×奥行51~54.5×高さ77.5~89.5cm(6段階)
10型L-D 全幅56.5~58×奥行53.5~57×高さ83.5~95.5cm(6段階)
- 材質: アルミ・スチール ●折りたたみ幅: 12cm ●最大使用者体重: 80kg

<固定>



非課税

<Aセット>

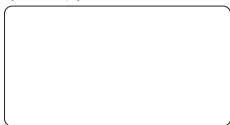


非課税

<Bセット>



非課税

<Cセット>

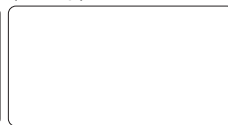

非課税

<Dセット>



非課税



NEW

使用環境やご利用者様の身体状況に
合わせて選べるサイズバリエーション



アルコール10型 セット内容


※使用環境や用途に合わせて脚部をお選びください。

本体

脚部セット

NEW

スリム&軽量タイプ

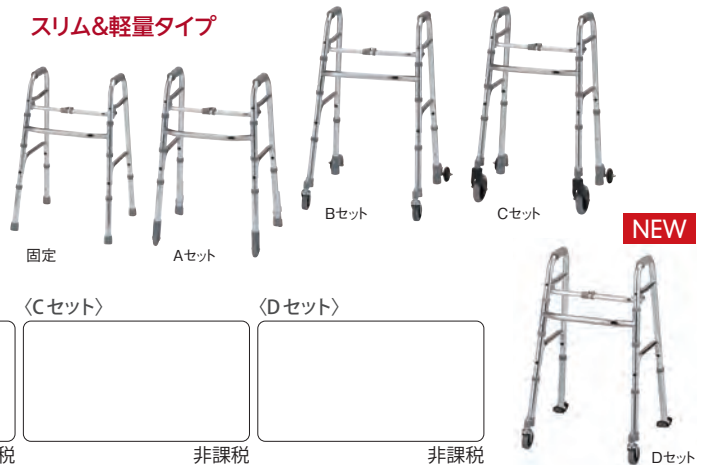

おすすめポイント アルコール10型シリーズ/オプション脚部Dセット

アルコール10型シリーズに、
新しいオプション脚部が登場
後脚を適度な抵抗がかかるソリ足
にして、歩行速度を抑制します

- ① 傷防止カバー(標準付属品)
フローリングや畳などを傷つけない、ソリ足用傷防止カバーを標準付属。水洗いができるので、いつも清潔に、繰り返しお使いいただけます。



●傷防止カバー取り付け例

② 使用例

前脚は自在キャスターで、方向転換などがスムーズに行えます。後脚には歩行時に適度な抵抗がかかるソリ足を採用。安定した歩行が可能になります。



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。 ※トールマークは身長170cm以上の方にもお使いいただける商品です。

特殊寝台

特殊寝付属品

床ずれ防止用具

体位交換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

購入品(入浴)

購入品(排泄)